




1a. Ábra. A sérvkötő felvétele, bal-oidall sérv esetén.

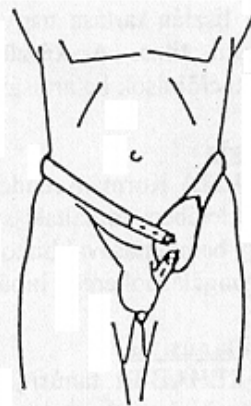

1c. Ábra. A sérvkötő felvétele, bal oldali sérv esetén.

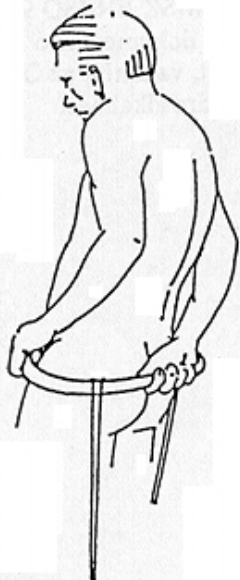

1b. Ábra. A sérvkötő felvétele, bal oldali sérv esetén.

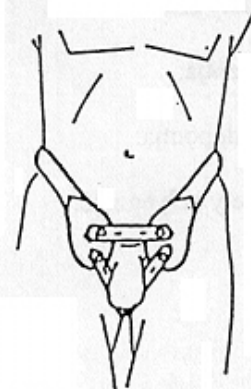

2. ábra. Két oldali lágyéksérvkötő.



GYSGY REHA Kft.

1149 Budapest, Pillangó u.12.

Tel: 329-0026,330-7735, Fax: 330-7770

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő

1., Általános ismertetés, használat

Kis lágyéksérv esetén amennyiben a beteg nem műthető, illetve műtét után gyenge hasfali izomzat a recidiva megakadályozása céljából alkalmazható.

2., Felvétele és használata

A lágyéksérvkötő méretsorozatban készül. Felvétele kisebb sérvек esetén álló helyzetben, nagyobb sérvек esetén fekvő helyzetben a sérv(ek) visszahelyezése után meztelen testre történjék. (ábrák 1., a., b., c., 2.,)

A sérvkötő párnát mindig abba a kézbe kell venni, amelyik oldalon van a sérv. Ezután a sérvkötő pelottát és a rugót két kézbe véve helyezzük fel a csípőtájékra. A deréköv végén lévő bőrszíjat a pelottán lévő felső gombra, a combszalagot a lábak között átvezetve a pelotta alsó gombjára kapcsoljuk.

A sérvkötő rögzítését úgy kell beállítani, hogy fájdalommentesen szorítsa a sérvkötő párnáját a sérvkapura.

A sérvkötő felkapcsolása után egy-egy erőteljes köhögéssel győződjünk meg a párna tökéletes zárásáról.

A sérvkötőt általában éjszakára le kell venni, mert a bőrnek szüksége van regenerálódásra a felfekvés elkerülése végett.

3. Tisztítása

A sérvkötő tisztán tartása nagy gondot igényel. Óvni kell a nedvességtől, vízben mosni tilos. A készüléket benzines ruhával lehet tisztítani a tűzrendészeti előírások betartásával.

4., Jótállás:

A GYSGY REHA Kft. a termék rendeltetésszerű használata mellett 12 hónap jótállást biztosít. A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni

5., Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat:

A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

.....

MEO



**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI !**