


# Attends® Slip Active



A felszívó kapacitást 1-10 skálán jelöljük.

Az Attends Slip Active pelenkákat a súlyos vizelet és/vagy széklet inkontinencia ellátására tervezték.

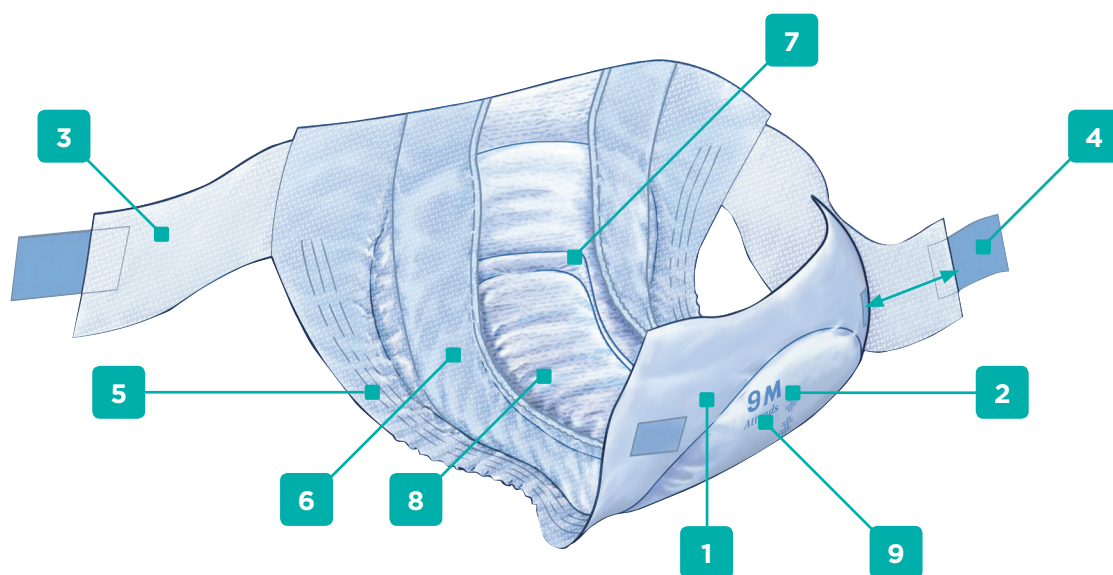

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1</b> Fehér, vízálló hátoldal, mely segíti a vizelet és széklet pelenkában tartását.   | <b>2</b> Nedvességjelző indikátor mutatja a pelenka csere szükségességét.  | <b>3</b> A bőrbarát, légáteresztő, textil hatású szárnyak kényelmesek és biztonsággal megtartják a pelenkát a derék körül. |
| <b>4</b> Két lépésből álló visszazárható ragasztócsík rendszer biztosítja a pelenka könnyű rögzítését. Használja a kék pozícionáló csíkot az előzetes rögzítéshez és esetleges későbbi igazításhoz. Majd erősítse meg a szélesebb ragasztócsíkokkal, hogy a helyére kerüljön a pelenka. | <b>5</b> Az oldalgumirozás segíti a tökéletes illeszkedést és csökkenti a szivárgás kockázatát.                                      | <b>6</b> A kifolyásgátló rendszer csökkenti a szivárgás kockázatát.  |
| <b>7</b> Anatómiai formált belső rész a kényelmes viseletért.   | <b>8</b> Szuperabszorbens belső mag nedvszívó réteggel a szivárgás megelőzésére, védelem a bőrszárazság és kellemetlen szagok ellen. | <b>9</b> A méret és a felszívó kapacitás szintje a pelenka hátoldalára van nyomtatva.                                      |

További információ: [www.replant.hu](http://www.replant.hu)

## Felszívóképesség / Méret

	Darab/Csomag/ Karton	EAN 7332152 Csomag/Karton	Derék méret (cm)	Hátoldal	Felszívó rész anyaga	Felső rész anyaga	Légáteresztő	Elasztikusság	Szivárgás elleni védelem	Visszazárható rögzítés	 Szagok elleni védelem	 Quick-Dry technológia
8	Attends Slip Active Medium 	28 4	200728 200735	75 - 110	Polietilén filmréteg	Kétrétegű belső mag vattával és szuperabszorbenssel és Quick-Dry nedvszívó réteggel.	Nem szőtt.	Igen, a szárnyak.	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201329 201336	100 - 145	Polietilén filmréteg	Kétrétegű belső mag vattával és szuperabszorbenssel és Quick-Dry nedvszívó réteggel.	Nem szőtt.	Igen, a szárnyak.	✓	✓	✓	✓
9	Attends Slip Active Medium 	28 4	201503 201510	75 - 110	Polietilén filmréteg	Kétrétegű belső mag vattával és szuperabszorbenssel és Quick-Dry nedvszívó réteggel.	Nem szőtt.	Igen, a szárnyak.	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201381 201398	100 - 145	Polietilén filmréteg	Kétrétegű belső mag vattával és szuperabszorbenssel és Quick-Dry nedvszívó réteggel.	Nem szőtt.	Igen, a szárnyak.	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium 	28 4	201404 201411	75 - 110	Polietilén filmréteg	Kétrétegű belső mag vattával és szuperabszorbenssel és Quick-Dry nedvszívó réteggel.	Nem szőtt.	Igen, a szárnyak.	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 2	201428 201435	100 - 145	Polietilén filmréteg	Kétrétegű belső mag vattával és szuperabszorbenssel és Quick-Dry nedvszívó réteggel.	Nem szőtt.	Igen, a szárnyak.	✓	✓	✓	✓



### Quick-Dry

Közvetlenül a felső réteg alatt helyezkedik el a Quick-Dry nedvszívó réteg, ahol a vizelet a betéttel érintkezik. Ez biztosítja a vizelet gyors felszívódását a termék belsejébe és megelőzi a vizelet visszaáramlását a termék felszínére. Nagy mennyiségű vizelet felszívására képes, ezáltal a bőr száraz marad és megelőzi a szivárgást is.



### pH érték

A gyapjas rostokat tartalmazó felszívó réteg mag technológiája segít a bőrhöz hasonló alacsony pH szint megtartásában. Ezáltal védi a bőrt.



### Aktív zóna

A termékek középső részén lévő aktív zóna magas felszívóképességet biztosít. Ezáltal a bőr száraz marad és megelőzi a szivárgást is



### Védelem a szagok ellen

Csökkenti a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét.



Az Attends Slip termékek a proDERM, Alkalmazott Bőrgyógyászati Kutató Intézet által lettek bevizsgálva és jóváhagyva.