

Alterna®

Alterna® alaplapok

Spirálban a biztonság és a komfort

ÚJ

extra
hajlékony



Alterna® alaplappok

– spirálban a biztonság és a komfort

Hajlékonyabb

Az Alterna alaplappok két különböző ragasztóból állnak, rétegelve és a jellegzetes spirális formába feltekerve egyesítik az összetevőket. Az egyik réteg a bőrhez való megbízható tapadást biztosítja, a másik réteg a nedvesség felszívásával védi a bőrt az irritációtól és lehetővé teszi a könnyű eltávolítást. Az új flexi-zónák a széleken jobb hajlékonyságot és kényelmesebb testmozgást biztosítanak.

Normál

Kolosztómával, ileosztómával vagy urosztómával élő emberek számára készülnek, akik a normál tapadású segédeszközt igénylik.

Extra

Olyan sztómaviselek ellátásához készülnek, akiknek extra védelemre van szükségük az agresszív hatású végtermékkel szemben. Jobban ellenáll a felmaródásnak. Anyaga átlátszó. Miközben felszívja a nedvességet, megduzzad a közepétől a szélek felé és kifehéredik. Jól látható, hogy mikor esedékes a cseréje.

Biztonsági csatlakozó

A kétrészes Alterna csatlakozók biztonsági zárral készülnek.


„Klikk” hang hallható, amikor megtörténik a zacskónak az alaplaphoz való helyes rögzítése anélkül, hogy a hasfalra nyomást kellene kifejteni.

Konvex kialakítás

A nehezen kezelhető sztómával élő emberek ellátásához. A konvex eszközök nyomást gyakorolnak a sztóma környéki bőrre, hogy csökkentse a szivárgás kockázatát azzal, hogy a sztóma elődomborodását lehetővé teszik. Két változatban elérhető.

Az **enyhén konvex** alaplappok gyengéd nyomást fejtenek ki a bőr szintjében lévő vagy kissé visszahúzódt, hegesedett, a bőrredőkben illetve laza bőrfelületen elhelyezkedő sztómákhoz.

A **konvex** alaplappok nagy nyomást gyakorolnak a hasfalra, indikációi: visszahúzódt sztómák, súlyosan hegesedett, mély bőrredőkkel fedett vagy nagyon laza bőrfelületen elhelyezkedő sztómák.

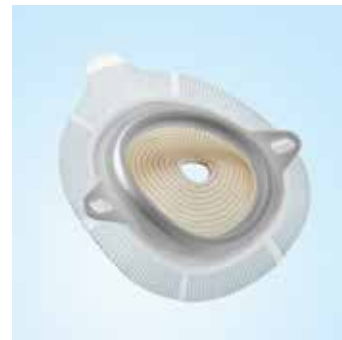

Választék

Alaplappok



Tapadás, forma	40mm csatlakozó	50mm csatlakozó	60mm csatlakozó
normál, sík (kivágható)	17701 (10-35 mm)	17706 (10-45 mm)	17710 (10-55 mm)
normál, konvex (kivágható)	17743 (15-21 mm)	17745 (15-33 mm)	17750 (15-43 mm)
extra, sík (kivágható)	17716 (10-35 mm)	17719 (10-45 mm)	17720 (10-55 mm)
extra, enyhén konvex (kivágható)	17735 (15-23 mm)	17737 (15-33 mm)	17741 (15-43 mm)

FIGYELMEZTETÉS

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Sztómaterápiás gyógyászati segédeszköz