

Termék információ

NEVARA 1 CICx



NE 1
CICx

A Nevara 1 CICx egy figyelemreméltó tulajdonságkészlettel rendelkező, távirányítható hallókészülék.

Az Adaptív visszacsatolás megszüntető plusz (AFC Plusz), az Adaptív zajcsökkentő plusz (ANR Plusz) és a Speech Cue Priority™ most mind belekerültek ebbe a kategóriába. A felhasználói élményt növeli a gyors és könnyű illesztés.

Audio Efficiency™

Beszéd

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™

Kényelem

- Adaptív visszacsatolás megszüntető plusz
- Adaptív zajcsökkentő plusz
- Binaurális koordináció

Személyre szabhatóság

- Nyelvspecifikus célértékek
- REMfit™

További tulajdonságok

Technikai jellemzők

- Digitális jelfeldolgozás 8 kHz-ig
- Multikörnyezet program
- Halk zaj kezelő

Testre szabható tulajdonságok

- Adatnaplózás
- Akár 5 hallási program
- 4 szabadon beállítható programhely
- RC-N kompatibilitás
- FittingLINK kompatibilitás

Működési feltételek

- Hőmérséklet: +1°C és +40°C között
- Páratartalom: 5% és 93% között, nem lecsapódó

Tárolási és szállítási feltételek

A hőmérséklet és a páratartalom nem haladhatja meg az alábbi határértékeket a tárolás és szállítás során:

- Hőmérséklet: -25°C to +60°C
- Páratartalom: 5% és 93% között, nem lecsapódó

MODELL ÁTTEKINTÉS

	CICx
Elemméret	10
Mikrofon rendszer	omni
Programkapcsoló	○
Hangerőszabályzó	**
Telefontekercs	–
Autotelefon érzékelés	–
IP besorolás	–
Könyök	–
Vékony cső	–
Hangszóró méretek	–
RC-N távirányító	○
FittingLINK	○
DAI / FM adapter	–

**A nyomógomb hangerőszabályzóként is beprogramozható standard ● opcionális ○

HALLÓKÉSZÜLÉK SZÍNEK

Minden hallójáratí készülék az alábbi négy színben kapható:



bézs



világos-
barna



közép-
barna



sötét-
barna

NEVARA 1 CICx TERMÉK ÁTTEKINTÉS





NE 1 CICx

--- CICx

FCC ID: U6XF2CIC01
IC: 7031A-F2CIC01

Illesztési mező – CICx

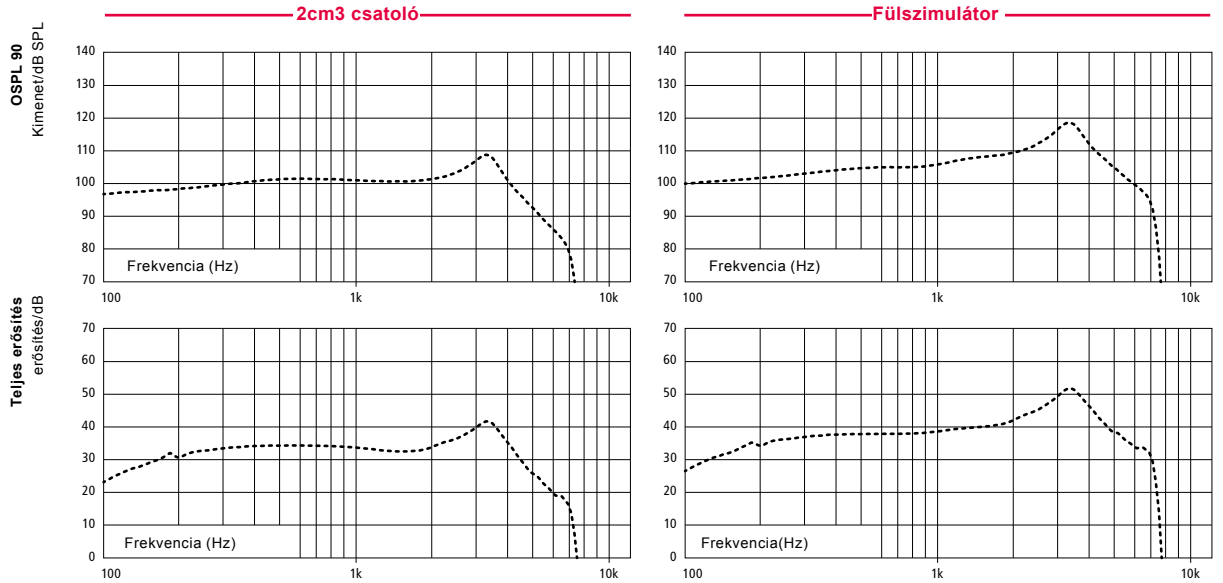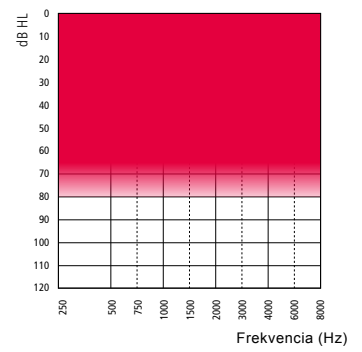

	2cm ³ csatoló	Fülszimulátor
	CICx	CICx
OSPL90, csúcs (dB SPL)	109	119
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	101	108
OSPL90, HFA (dB SPL)	102	–
Teljes erősítés, csúcs (dB)	42	52
Teljes erősítés, 1600 Hz (dB)	32	40
Teljes erősítés, HFA (dB)	34	–
Referencia teszt erősítés (dB)	24	34
Alap áramfelvétel (mA)	1.1	1.1
Működési áramfelvétel (mA)	1.2	1.1
Torzítás 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<3/<3/<2
Frekvencia tartomány (Hz)	100 – 7100	–
Bemeneti zaj ¹⁾ , dB(A)	21	23
Programkapcsoló	○*	○**
Helyi hangerőszabályzó	**	**
Telefontekercs	–	–
Autotelefon érzékelés	–	–
Elemméret	10	10
Mikrofonrendszer	omni	omni

● standard ○ opcionális

¹⁾ A technikai adatok mérése expanzióval, a megfelelő teszt box beállításokkal történtek.

A „2 cm³ –es csatoló” alatt az IEC 60318-5:2006 szerinti csatoló értendő. „Fülszimulátor” megfelel az IEC 60318-4:2010 csatolónak. Alkalmazott verziók: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

**A nyomógomb hangerőszabályzóként is beprogramozható

TULAJDONSÁGOK ÁTTEKINTÉSE

NEVARA 1 CICx

JELFELDOLGOZÁS

ChannelFree™	●
Speech Cue Priority™	●
Frekvencia sávszélesség	8 kHz

HALLÁSI KÉNYELEM

Adaptív zajcsökkentő plusz (ANR Plusz)	2 szabályzó
Adaptív zajcsökkentő plusz (ANR Plusz)	●
Halk zaj kezelő	2 szabályzó

BINAURÁLIS SZINKRONIZÁCIÓ

Hangerőszabályzás, programcsere	●
---------------------------------	---

KÉNYELMI TULAJDONSÁGOK

Hangerőszabályzó kattantások	●
Némítás a nyomógombbal	●
Konfigurálható bekapcsolás késleltető	●

TESTRE SZABHATÓSÁG

Program opciók/memóriák	5/4
Adatnaplózás	●
Nyelvspecifikus célértékek	●
REMfit™	●
Interaktív kliens	●

PROGRAMOZÓ FELSZERELÉS

Nevara 1 CICx hallókészülékeket a NOAH kompatibilis, MS-Windows® alapú számítógépes illesztőszoftver, az Oasis 22.0 vagy magasabb verziójával lehet programozni. Követelmények: HI-PRO, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink3, FittingLINK vagy nEARcom programozó interfész szükséges. Az Oasis standalone is használható.

Operációs rendszer

Microsoft® Windows® 8.1, 32/64 bit (minden kiadás)
Microsoft® Windows® 8, 32/64 bit (minden kiadás)
Microsoft® Windows® 7,32/64 bit (minden kiadás)
Microsoft® Windows Vista®, 32/64 bit (minden kiadás)
Microsoft® Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (minden verzió)
Noah 4.3 (minimum a Windows® 8-hoz)
A Noah 3 minden verziója (nem ajánlott)
Megjegyzés: amennyiben Ön OAS szoftvert használ, kérjük, csak a fent felsorolt Noah programokat alkalmazza a minimum feltételek szerint frissítve.

TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	CIKKSZÁM
Prog. Kábel 2-es New Standard (HiPro)	Kék, bal	384-20-033-00
Prog. Kábel 2-es New Standard (HiPro)	Piros, jobb	384-20-032-00
Prog. Kábel 2-es New Standard (NOAHlink)	Kék, bal	384-20-035-00
Prog. Kábel 2-es New Standard (NOAHlink)	Piros, jobb	384-20-034-00
FlexConnect Mini	Fülbe helyezhető készülékekhez	117468

KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉK

LEÍRÁS

CIKKSZÁM

RC-N távirányító

A hangerőszabályzás és programváltás diszkrét eszköze

139772



FittingLINK

Vezeték nélküli programozó egység a hallókészüléknek a számítógéppel történő közvetlen programozásához

144720

